



ARCO SEZIONALE

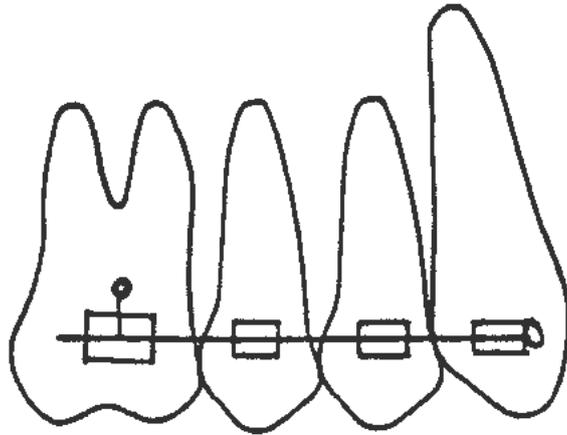


IMPIEGO:

- ANCORAGGIO
- ALLINEAMENTO
- ARRETRAMENTO CANINO/PREMOLARE
- ESPANSIONE CANINO/PREMOLARE


ATTIVAZIONI:

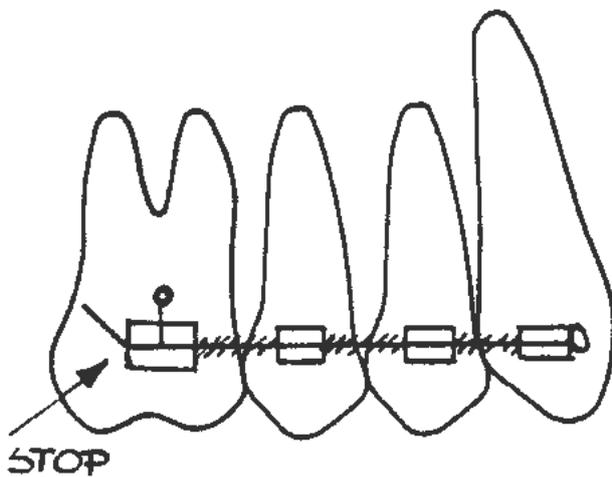


ANCORAGGIO (legatura metallica)

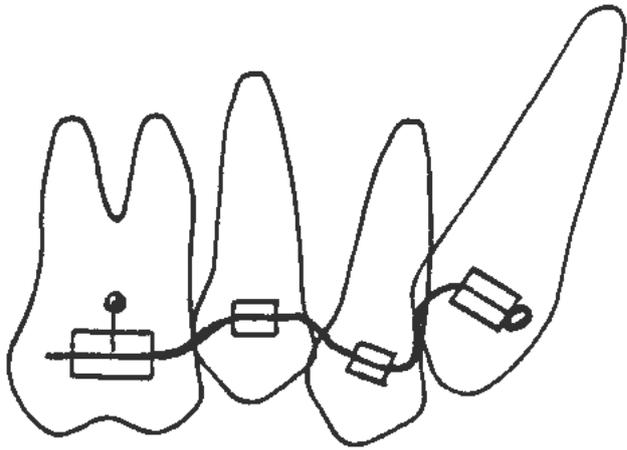


ALLINEAMENTO (sezionale NiTi)

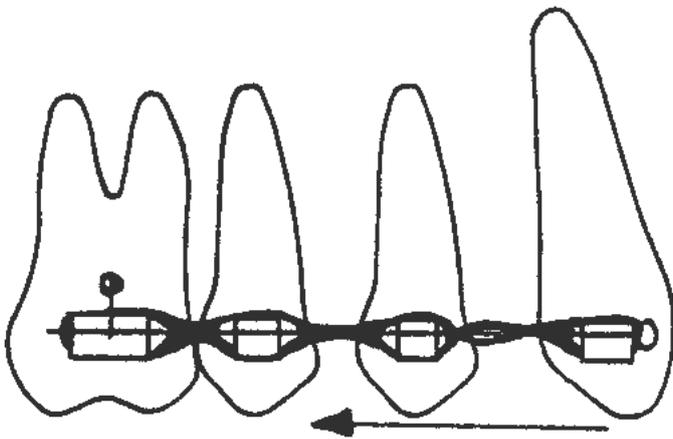

ARRETRAMENTO (catenella elastica)

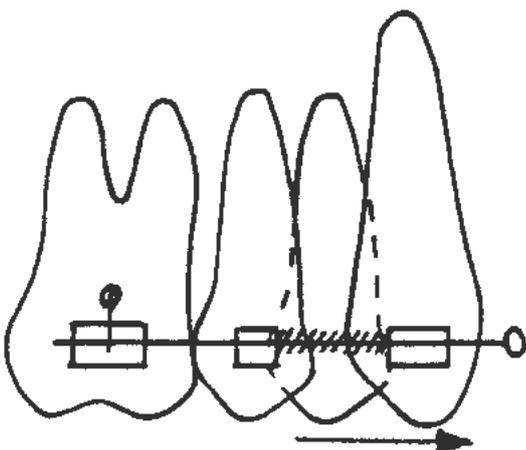

ESPANSIONE (molla attiva di 2m/m)

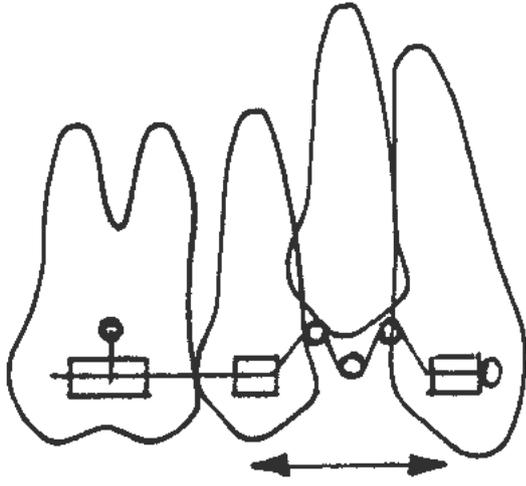


ESPANSIONE (ansa M attiva di 2m/m)

ARCO DI UTILITA' BL (baionette lunghe)




IMPIEGO:


- INTRUDERE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE
- ESTRUDERE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE
- ALLINEARE (anse T)
- GUIDARE LA MIGRAZIONE MESIALE MOLARE
- ROTAZIONE MOLARE

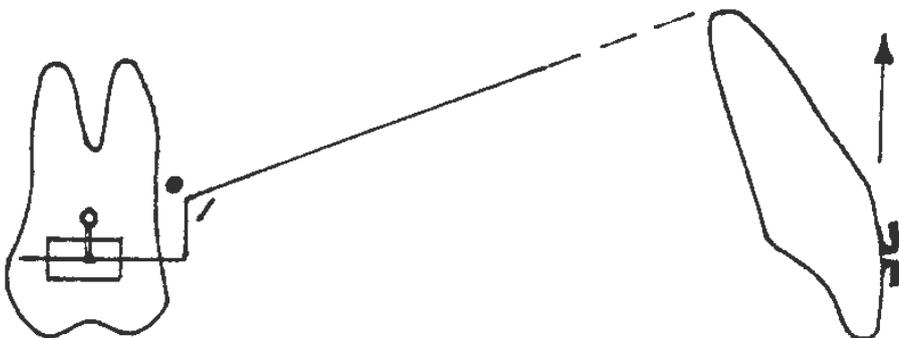


INTRUDENTE

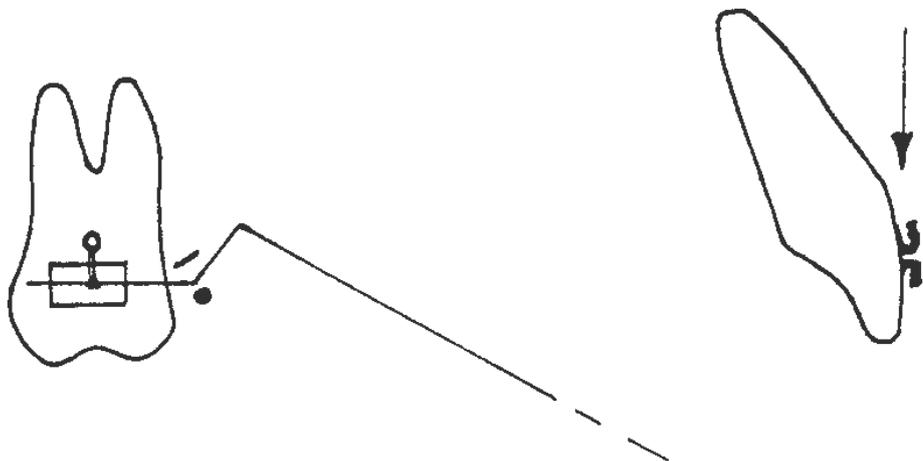


ESTRUDENTE

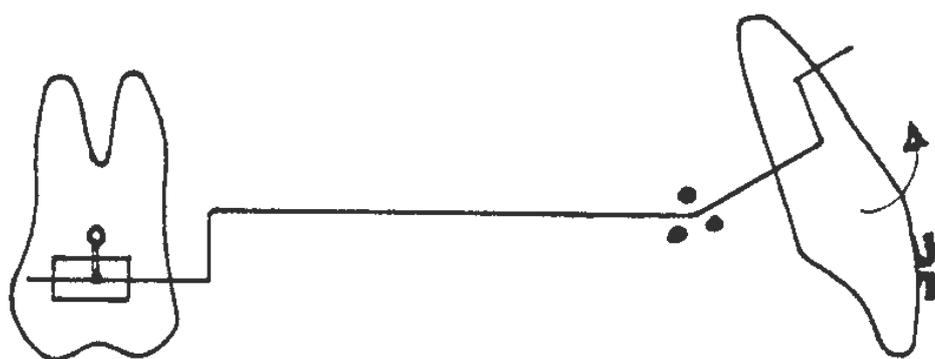


**INTRUDENTE CON
MAGGIORE
VESTIBOLO/INCLINAZIONE
ANTERIORE**

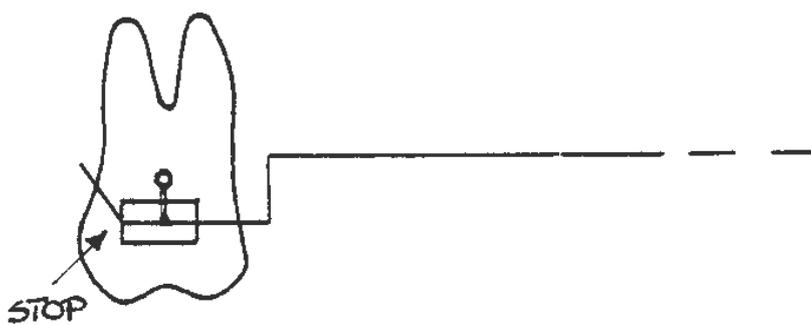

**LA CHIUSURA DELL'ARCO
RETRO MOLARE CONSENTE DI
RIDURRE/CONTROLLARE LA
VESTIBOLARIZZAZIONE
ANTERIORE
DURANTE L'INTRUSIONE**

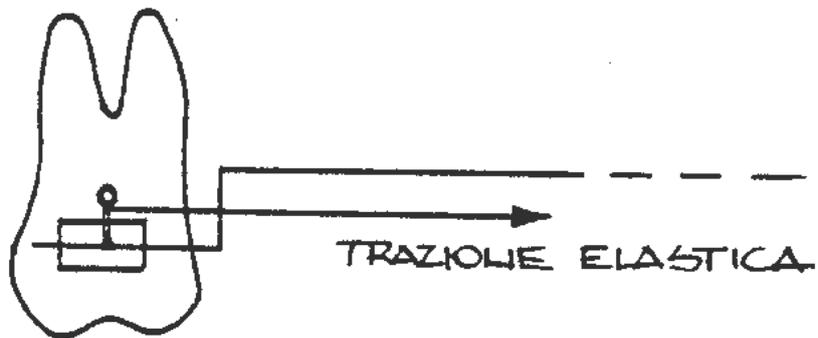


MESIALIZZAZIONE
MOLARE GUIDATA

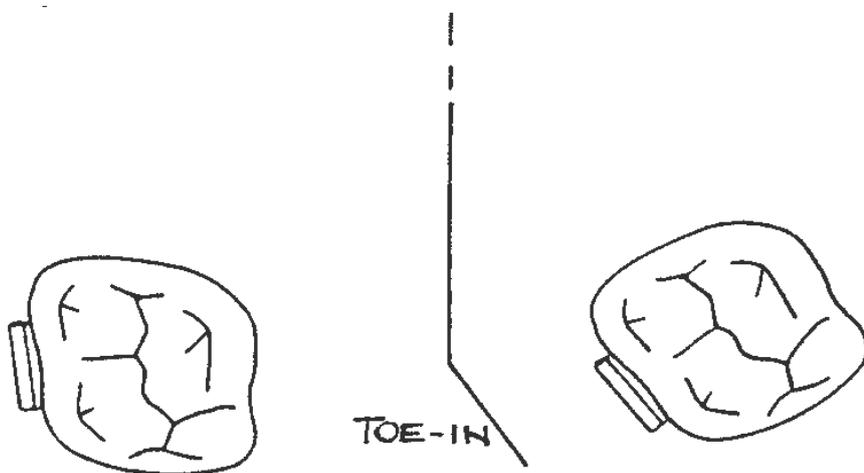

ROTAZIONE MOLARE

ARCO DI UTILITA' BE (baionette esatte)

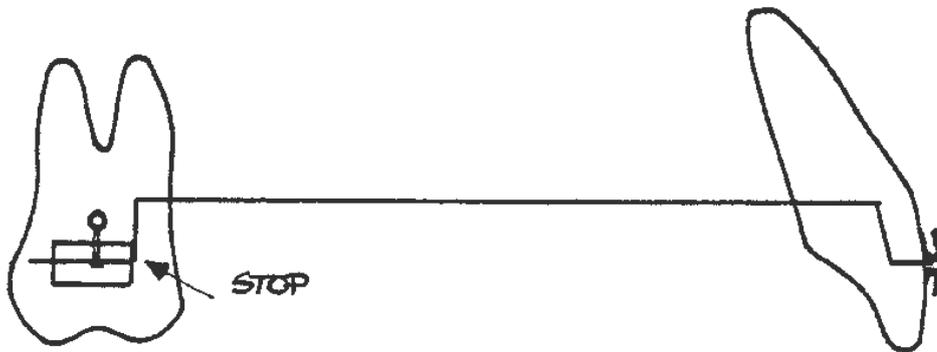

IMPIEGO:

- INTRUDERE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE
- ESTRUDERE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE
- ALLINEARE (anse T)
- BLOCCARE LA MIGRAZIONE MESIALE MOLARE
- ROTAZIONE MOLARE

ATTIVAZIONI:

(COME ARCO DI UTILITA' BL)


ARCO DI UTILITA' PER ARRETRARE (contrazione)




IMPIEGO:

- ARRETRARE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE
- ARRETRARE/ESTRUDERE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE
- ALLINEARE
- ARRETRARE/INTRUDERE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE
- ALLINEARE
- ARRETRARE ALLINEARE (anse T)


ATTIVAZIONI:

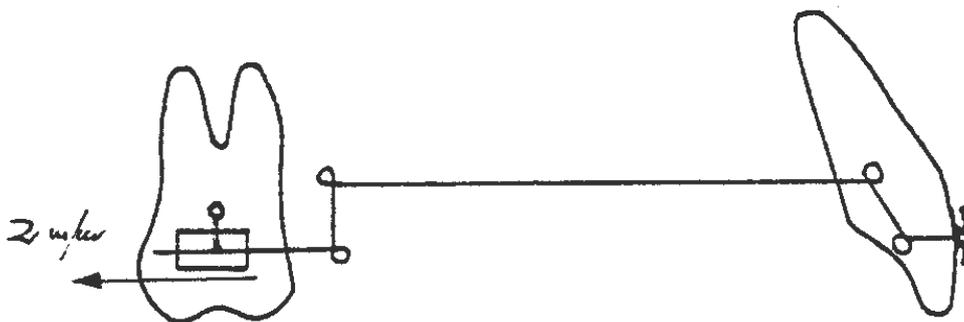


ARRETRAMENTO

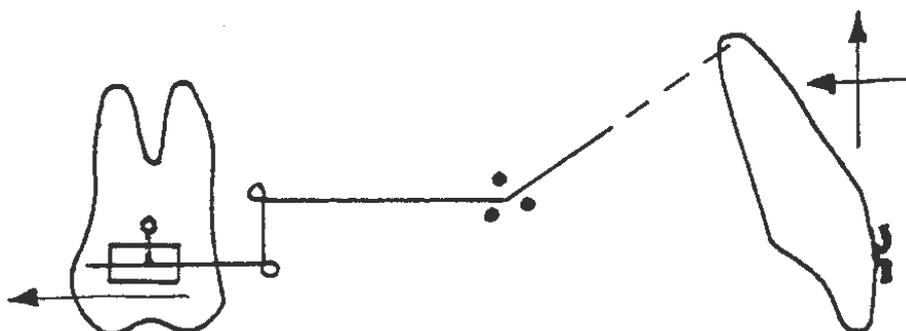

ARRETRAMENTO
INTRUSIONE

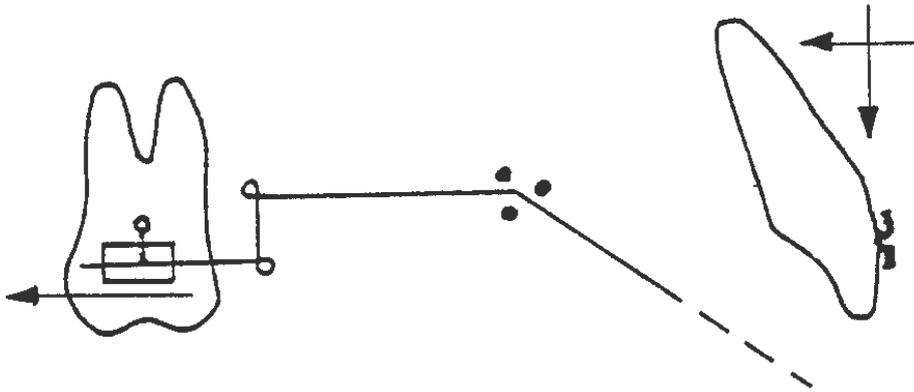


**ARRETRAMENTO
ESTRUSIONE**

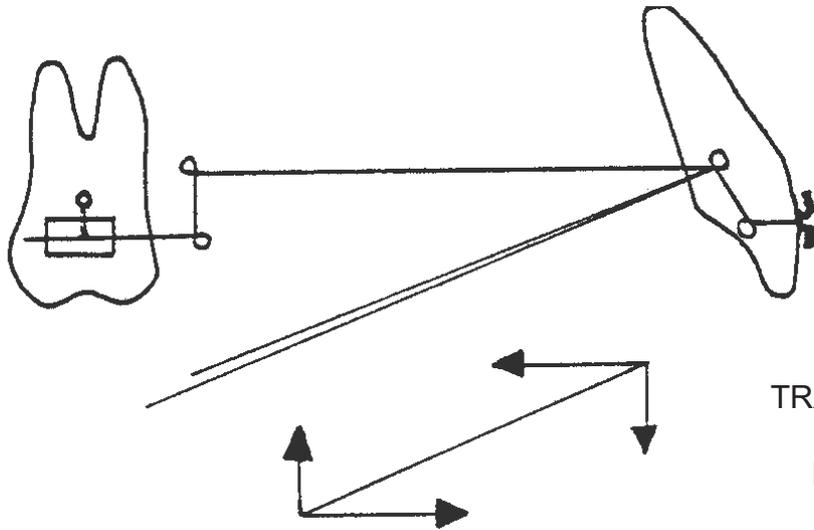

**ARRETRAMENTO MEDIANTE
TRAZIONE ELASTICA CON MASSIMO
ANCORAGGIO MOLARE E MINOR
RETRO INCLINAZIONE FRONTALE**

**ATTENZIONE! VALUTARE I VETTORI
VERTICALI ED ORIZZONTALI
DELLA TRAZIONE ELASTICA**


ARCO DI UTILITA' PER VESTIBOLARIZZARE (espansione)

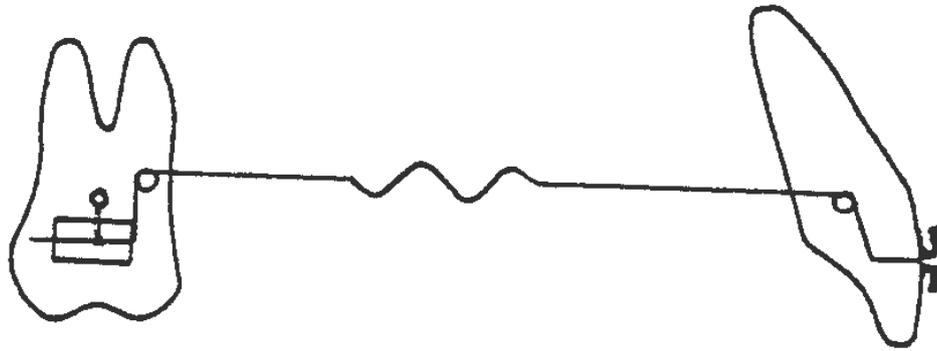


IMPIEGO:

- VESTIBOLARIZZARE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE
- VESTIBOLARIZZARE / ESTRUDERE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE
- VESTIBOLARIZZARE / INTRUDERE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE
- VESTIBOLARIZZARE ALLINEARE (anse T)



ATTIVAZIONI:

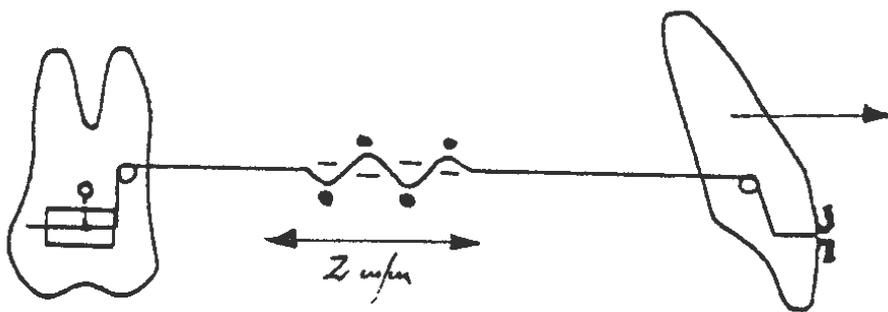

VESTIBOLARIZZAZIONE

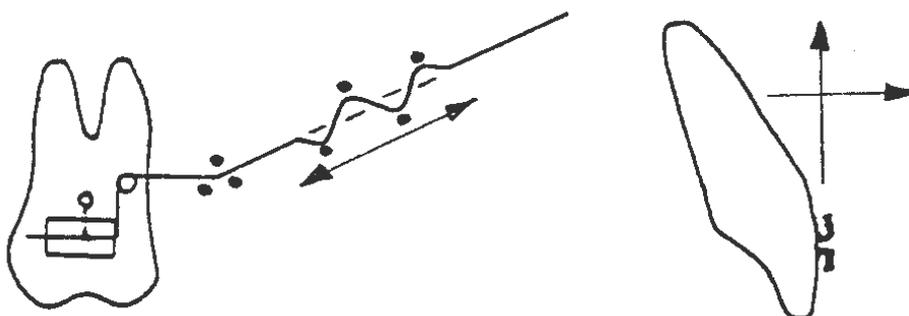

VESTIBOLARIZZAZIONE
INTRUSIONE

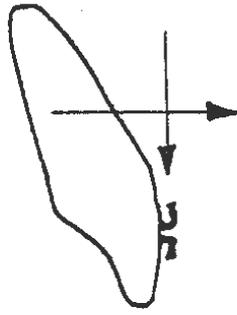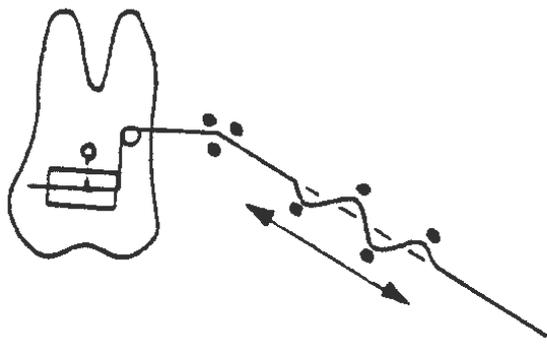


VESTIBOLARIZZAZIONE
ESTRUSIONE



ANSE A T


ARCO CONTINUO PER ARRETRARE (contrazione)

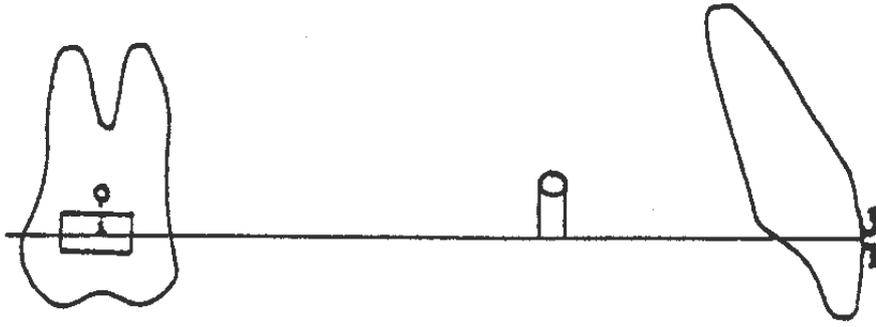


IMPIEGO:

- CONTRAZIONE
- ARRETRARE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE
- MESIALIZZARE IL GRUPPO DENTALE POSTERIORE


ATTIVAZIONI:

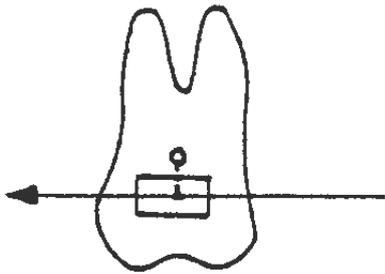

TIRARE E CHIUDERE L'ARCO RETRO MOLARE SINO A CHIUSURA DELLE BOUCLE (2m/m ca)

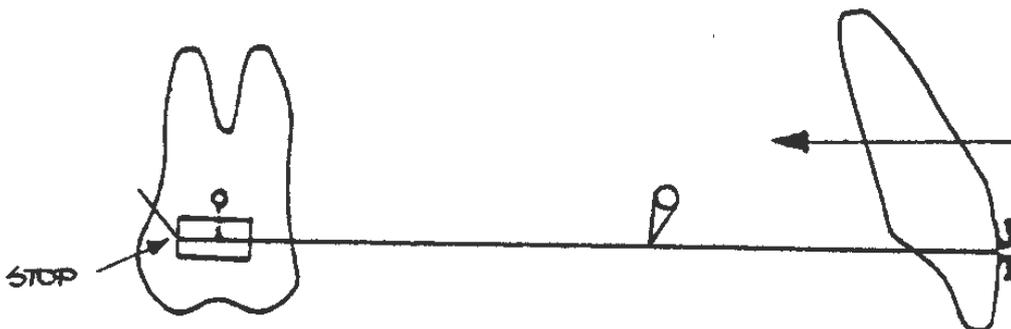



ARCO CONTINUO PER VESTIBOLARIZZARE (espansione)

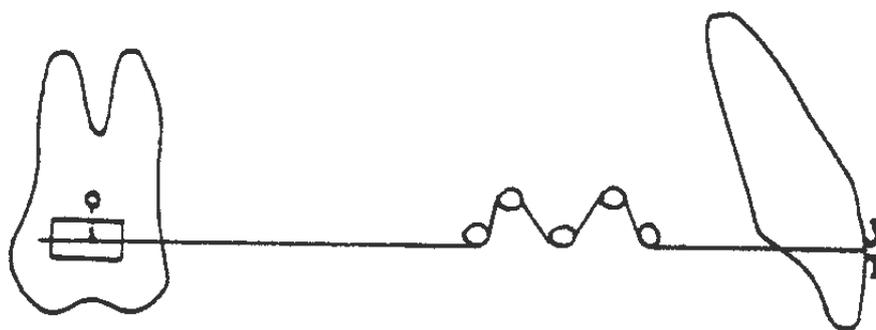


IMPIEGO:

- ESPANSIONE
- VESTIBOLARIZZARE IL GRUPPO DENTALE ANTERIORE

ATTIVAZIONI:

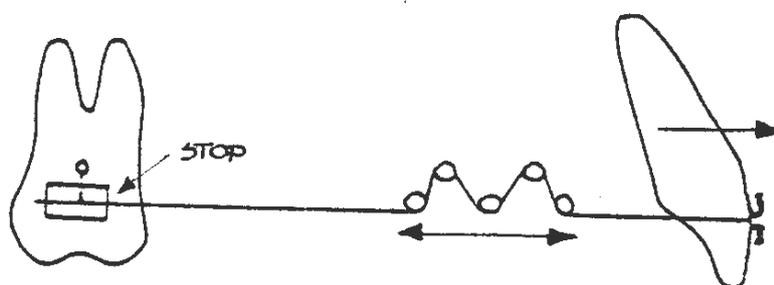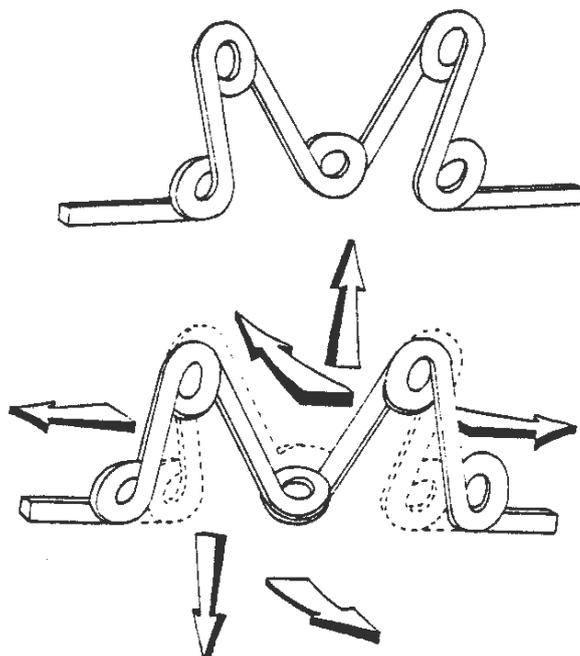

ARCO CONTINUO NiTi


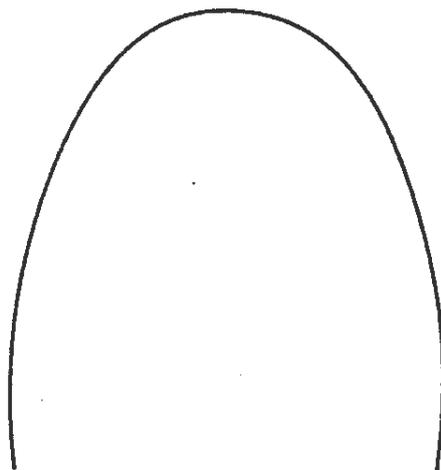


IMPIEGO:



- ALLINEAMENTO
- SCONSIGLIATO PER CONTENZIONE

ATTIVAZIONI:

- AUTOATTIVO
- CONSIGLIATE LE LEGATURE METALLICHE

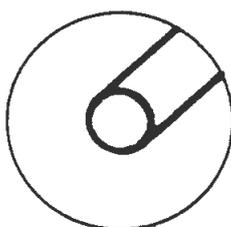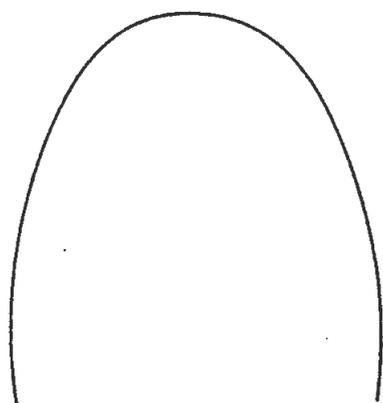

016 TERMICO (forte allineamenti)

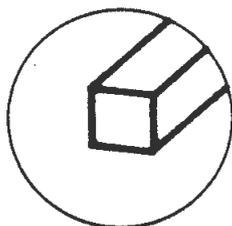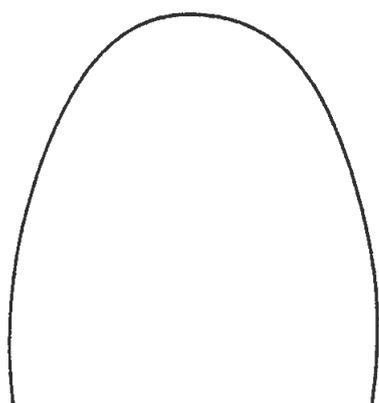

**016x016 NiTi STANDARD
(allineamento con maggior controllo asse dentale)**

ARCO CONTINUO NiTi SPEE INVERSA





IMPIEGO:



- MODIFICA DELLA CURVA DI SPEE

ATTIVAZIONI:

- AUTOATTIVO
- APPLICARE LEGATURE RIGIDE METALLICHE

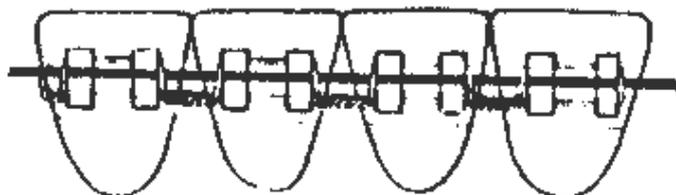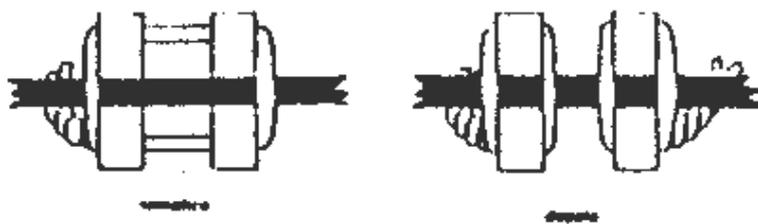

ARCO CONTINUO NiTi COUNTER FORCE

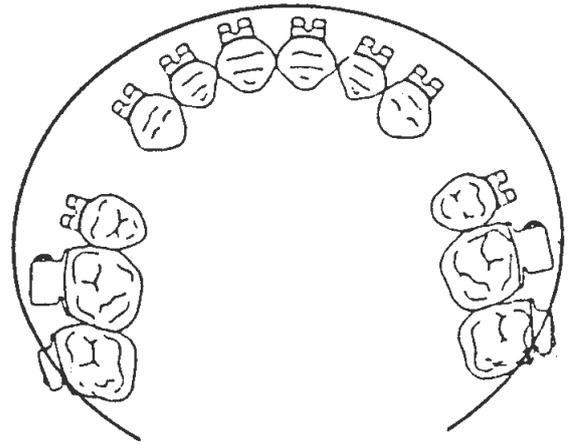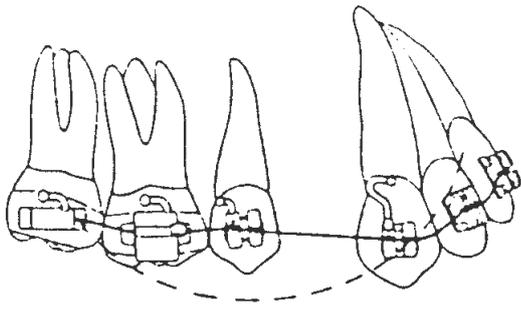

IMPIEGHI:

- CHIUSURA DIASTEMI/ALLINEAMENTO

ATTIVAZIONI:

- LEGATURA ELASTICA CONTINUA INCROCIATA CON FILO PIENO DA MOLARE A MOLARE